


# DACLON

## NYLON



<b>Type</b>	Monofilament
<b>Samenstelling</b>	Extrusie uit polyamide 6.0 of 6.6
<b>Coating</b>	Geen
<b>Kleur</b>	Blauw Zwart
<b>Weefselreactie</b>	Minimaal
<b>Resorptie</b>	Niet-resorbeerbaar, met een geleidelijke inkapseling van de hechting door fibreus bindweefsel. De substantie van de draad vermindert ongeveer 10% per jaar door de afbraak van chemische verbindingen (hydrolyse).
<b>Presentatie</b>	Doos met 12 hechtingen

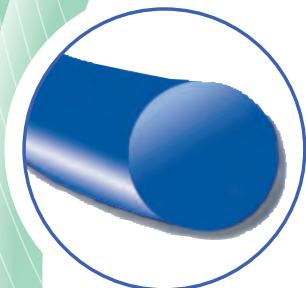

Voor kwaliteit  
&  
veiligheid

# DACLON NYLON



### **EIGENSCHAPPEN**

- Grote treksterkte, niet-resorbeerbaar
- Synthetisch
- Monofilament met een microscopisch gelijkmatige diameter
  
- Buigzaamheid en soepelheid
  
- Hermetisch gesloten verpakking

### **VOORDELEN**

- Voortreffelijke en permanente weefselondersteuning
- Minimale weefselreactie
- Soepele weefselpassage zonder zaageffect, weefseltrek en trauma
- Geen capillaire werking (geen bevordering van bacteriegroei)
- Voortreffelijke knoop-glij eigenschappen
  
- Goede hanteerbaarheid
- Gemakkelijk te knopen
- Goede knoopveiligheid
  
- Luchtdichtheid en steriliteit van de producten gegarandeerd

**INDICATIE**      Hechting van weke delen en/of ligature

**Daclon Blauw**

- vooral
- Sluiten van de huid
  - Algemene heekkunde
  - Plastische chirurgie
  - Gastro-intestinale chirurgie
  - Gynaecologie
  - Obstetrie
  - Orthopedie

**Daclon Zwart**

- vooral
- Plastische chirurgie
  - Oogheekkundige chirurgie