


SILK



	<i>Silk Braided</i>	<i>Silk Virgin</i>
Type	Gevlochten multifilament	Gedraaid multifilament
Samenstelling	Gevlochten vezels van de cocon van de zijdeworm	Gedraaide vezels van de cocon van de zijdeworm
Coating	Silicon	Geen
Kleur	Zwart	Blauw
Weefselreactie	Matig	
Resorptie	De zijde veroorzaakt aanvankelijk een minimale ontstekingsreactie van de weefsels, alvorens ingekapseld te worden door fibreus bindweefsel.	
Presentatie	Doos met 12 hechtingen	

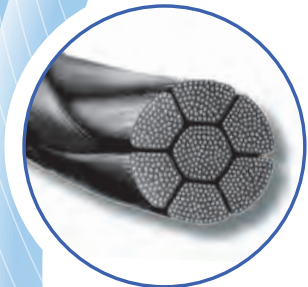

Voor kwaliteit
&
veiligheid

SILK



EIGENSCHAPPEN

- Grote treksterkte, niet-resorbeerbaar
- Gevlochten of gedraaide draadopbouw
- Gecoat multifilament
- Hermetisch gesloten verpakking

VOORDELEN

- Voortreffelijke en langdurige weefselondersteuning tot 3 maanden
- Voortreffelijke hanteerbaarheid
- Grote flexibiliteit
- Grote treksterkte
- Voortreffelijke knoopveiligheid
- Soepele weefselpassage met minimaal zaageffect, weefseltrek en trauma
- Goede knoop-glij eigenschappen
- Beperkte capillaire werking
- Luchtdichtheid en steriliteit van de producten gegarandeerd

INDICATIE

Hechting van weke delen en/of ligature

vooral

- Algemene heekunde
- Sluiten van de huid
- Oogheekkundige chirurgie
- Tand- en Mondchirurgie
- Gastro-intestinale chirurgie
- Gynaecologie
- Obstetrie

CONTRA-INDICATIE

- Urinewegen
- Galwegen
- Bekende overgevoeligheid of allergie voor zijde